

超靜音無油式空壓機




WDS2 / WDS4



美觀靜極

內部結構

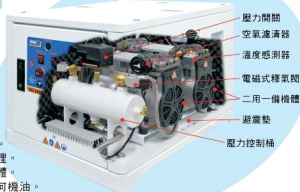

產品特性：

- 整機台灣製造。
- 二用一備的設計理念。
- 獨立開關可控制機器運轉。
- 壓力控制桶，內部防鏽處理。
- 維修方便快速，快拆式機體。
- 無油式機體，不用添加任何機油。
- 搭配88L儲氣桶6-8kg升壓時間40秒。
- 體積小，不佔環境空間，可堆疊使用。
- 異常偵測，故障自動斷電，蜂鳴警示提醒。
- 無油雙機體提供更大用氣量，供應氣源更穩定。
- 設計優良散熱效果佳，運轉溫度低，增加機器使用壽命。
- 低噪音，無響室運轉噪音51db，空曠環境下運轉噪音60db。
- 機體溫度達60℃時起動散熱功能，低於40℃時停止散熱功能。



WDS4X2



WDS4X3

MODEL	Volt/Ph	Kw / HP	NO.	L/min@5kg/cm ² 50Hz / 60Hz	kgf/cm ² / psi	W	dB(A)	Kg/Lbs	cm	
WDS2	220 / 1	1.1 / 1.5	2	101 / 122	8 / 115	50	60 / 132	55x51x51	3 / 2	
WDS4	220 / 1	2.2 / 3.0	4	187 / 229	8 / 115	51	82 / 180	70x51x51	6 / 4	
WDS4X2	220 / 1	4.4 / 6.0	8	374 / 458	8 / 115	51	164 / 360	70x51x102	12 / 8	
WDS4X3	220 / 1	6.6 / 9.0	12	561 / 687	8 / 115	51	246 / 540	70x51x153	18 / 12	

PUMA INDUSTRIAL CO., LTD. 合正機械股份有限公司醫器廠

- 公司/工廠：彰化縣田中鎮斗中路二段427號3樓
- TEL: 886-4-8761811 e-mail: sales@pumabiomedical.com
- FAX: 886-4-8752211 www.pumabiomedical.com

